



(10) **DE 20 2020 005 122 U1** 2021.04.15

(12) **Gebrauchsmusterschrift**

(21) Aktenzeichen: **20 2020 005 122.5**

(51) Int Cl.: **A61F 5/44 (2006.01)**

(22) Anmeldetag: **10.12.2020**

(47) Eintragungstag: **10.03.2021**

(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: **15.04.2021**

(66) Innere Priorität:

20 2020 003 341.3 **24.07.2020**

20 2020 004 804.6 **17.11.2020**


(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:

Ladewig, Andrea, 06895 Zahna-Elster, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **Sicht- Geruchs- und Temperaturschutztasche für medizinische Auffangbeutel bis 2000ml**

(57) Hauptanspruch: Die Sicht- Geruchs- und Temperaturschutztasche für medizinische Auffangbeutel bis 2000ml, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus 2 Filzplatten besteht, von die eine Stärke von 0,4 cm und einem Durchmesser von 35 cm haben und am äußeren Rand durch eine Stepp-Stich-Naht miteinander verbunden Das Material Filz garantiert einen Sicht- Geruchs- und Temperaturschutz.

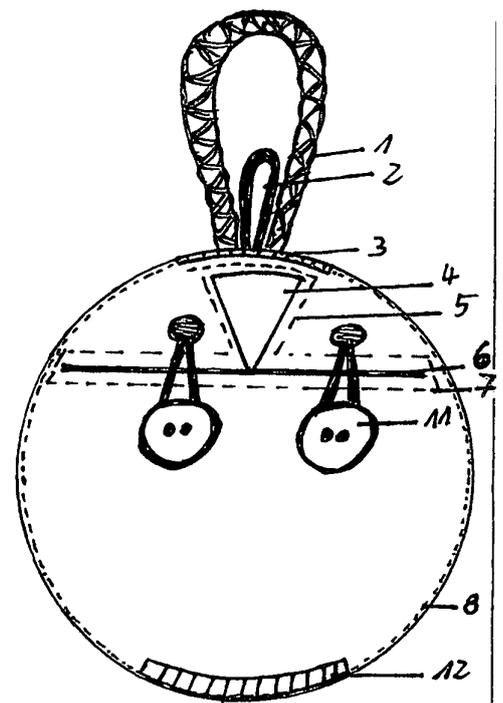

Beschreibung

[0001] Wie eigene Recherchen im Internet und Auskünfte von Fachleuten ergaben, ist davon auszugehen, dass bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine derartige

[0002] „Beutelverstecker“ Schutz- Sicht- und Geruchshemmende Temperaturschutztasche für medizinische Urinauffangbeutel bis 2000 ml (mit Befestigungs- und Haltevorrichtung) und andere medizinische Auffangbeutel (mit Befestigungs- und Haltevorrichtung) für diverse Körperflüssigkeiten bis 2000ml - design by andrea - nicht vorhanden ist.

[0003] Betroffene mit künstlicher Urinabführung, durch eine Blasenentleerungsstörung, leiden bereits aus medizinischer Sicht an ihrer Krankheit, sind daher psychisch wie seelisch sehr stark belastet.

[0004] Der dabei verwendete Urinauffangbeutel bis 2000 ml besteht aus durchsichtigem Material.

[0005] Der darin aufgefangene Urin (manchmal mit Blut vermischt) ist für Jedermann somit sichtbar. Dieser Umstand verstärkt die psychische Belastung, sowie die Scham des Betroffenen gegenüber ihrem Umfeld.

[0006] Des Weiteren nehmen der Urinauffangbeutel bis 2000 ml und dessen Inhalt sehr schnell die Umgebungstemperatur an. Dies bedeutet, wenn es kühler wird, ist auch der Inhalt des Urinauffangbeckens kalt und für den Betroffenen und dessen Körper unangenehm.

[0007] Der neuartige „Beutelverstecker“ die „Schutz-Sicht- Geruchshemmende Temperaturschutztasche“ - design by andrea - garantiert:

- die verborgene Aufnahme der Urinauffangbeutel bis 2000 ml,
- verhindert die Sicht des Umfeldes auf der Urinauffangbeutel bis 2000 ml;
- schützt den Betroffenen und deren Hilfspersonen vor direkten Kontakt mit dem Urinauffangbeutel bis 2000 ml;
- schützt den Urinauffangbeutel vor einer direkten Beschädigung
- wirkt Geruchshemmend
- ist waschbar mit einem flüssigen Feinwaschmittel und einem Hygienespüler (um die Hygienestandards gewährleisten zu können)

[0008] Der „Beutelverstecker“, die „Schutz- Sicht- und Geruchshemmende Temperaturschutztasche für medizinische Urinauffangbeutel bis 2000 ml (mit Befestigungs- und Haltevorrichtung) und andere medi-

zinische Auffangbeutel mit Befestigungs- und Haltevorrichtung) für diverse Körperflüssigkeiten bis 2000 ml - design by andrea - besteht aus zwei kreisrunden Polyester Filzplatten mit einem Durchmesser von ca. 35cm und einer Stärke von 0,5 cm.

[0009] Im oberen Drittel der Vorderseite befindet sich ein umnähter Schlitz für das Einbringen des Urinauffangbeckens bis 2000 ml mit einer Öffnung für die Befestigungs- und Haltevorrichtungen von Urinsammelbehältern.

[0010] Am oberen Rand sind zwei Kordelschlaufen aus Baumwolle mit Kern 6mm, eingebracht wobei die große Schlaufe ungefähr 18 cm und die kleine Schlaufe ungefähr 5cm an Länge hat.

[0011] Die Schlaufen wurden mit mehreren Nähten gesichert um größtmögliche Sicherheit zu haben.

[0012] Die längere Kordelschlaufe ist universell nutzbar, gedacht aber vorrangig für die Anbringung der neuartigen Tasche am Rollator, Rollstuhl oder anderen Gegenständen oder einfach zum Tragen in der Hand oder dem überhängen am Unterarm.

[0013] Die kürzere Kordelschlaufe dagegen kann mit Verwendung eines Hakens dafür genutzt werden die Tasche dort anhängen zu können wo keine so große Bodenfreiheit ist (z.B. am Nachtschrank oder ähnlichem) garantiert somit den Abstand des neuartigen Schutz- Sicht und Temperaturschutz zum Fußboden.

[0014] Das Einhängen des Urinauffangbeckens am Bett, erfolgt an den Befestigungs- und Haltevorrichtung des Urinauffangbeckens, dadurch wird die Schutz- Sicht- Geruchshemmende Temperaturschutztasche, in keiner Weise durch das Gewicht des Urinauffangbeckens belastet, sie umhüllt den Urinauffangbeutel jedoch und macht ihn dadurch nicht sofort sichtbar und schützt vor äußeren Einflüssen.

[0015] Durch eigens aufgemalte Motive (mit Textilfarbe) gewinnen die Taschen an Individualität.

[0016] Folgende Pflegehinweise sind zu beachten:

- einzeln und separat waschen,
- waschbar in der Waschmaschine bei 30°C (Wollprogramm)
- mit einem flüssigen Feinwaschmittel und einem Hygienespüler,
- um Beschädigungen an den Verschlüssen durch die Waschtrommel zu vermeiden, die Tasche in einem Wäschenetz waschen, (eigens ausprobiert)

Bezugszeichenliste

- 1) lange Kordel
- 2) kurze Kordel
- 3) Knopflochstich-Naht
- 4) keilförmige Öffnung
- 5) Steppstich - Naht
- 6) waagerechte Öffnung
- 7) Steppnaht
- 8) Verbindungs-Steppnaht
- 9) vordere Filzplatte
- 10) hintere Filzplatte
- 11) Verschlussmöglichkeit Knöpfe
- 12) Öffnung mit Knopflochstich - Naht
- 13) Verschlussmöglichkeit Klickverschlüssen Seite 3 von 3

die durch unterschiedliche Verschlussmöglichkeiten (Knöpfe oder Klickverschlüsse) verschlossen wird.

5. Die Sicht- Geruchs- und Temperaturschutztasche nach Anspruch 1,2,3 und 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass sich eine keilförmige Öffnung von H= 7x und B= 0-7 cm nach oben auslaufend, mit einer Steppstich-Naht umrandet, an der Vorderseite befindet, welche zum Verbleib der Befestigungs- und Haltebügel dient.

6. Die Sicht- Geruchs- und Temperaturschutztasche nach Anspruch 1,2,3,4 und 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass sich am unteren Außenrand, der vorderen und hinteren Filzplatte, eine 11 cm große Öffnung, um näht mit einer Knopflochstich Naht, befindet, um das hindurch stecken des Ablassventils des Sammelbeutels zu ermöglichen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen

Schutzansprüche

. Sicht- Geruchs- und Temperaturschutztasche für medizinische Auffangbeutel bis 2000ml


1. Die Sicht- Geruchs- und Temperaturschutztasche für medizinische Auffangbeutel bis 2000ml, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie aus 2 Filzplatten besteht, von die eine Stärke von 0,4 cm und einem Durchmesser von 35 cm haben und am äußeren Rand durch eine Stepp-Stich-Naht miteinander verbunden Das Material Filz garantiert einen Sicht- Geruchs- und Temperaturschutz.

2. Die Sicht- Geruchs- und Temperaturschutztasche nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass durch zwei unterschiedlich lange Kordelschlaufen aus Baumwolle, mit 6mm Kern die am oberen Außenrand eingenäht sind, die Möglichkeit besteht, an verschiedensten Gegenständen angehängen zu werden..

3. Die Sicht- Geruchs- und Temperaturschutztasche nach Anspruch 1 und 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass am oberen Außenrand eine Knopflochstich-Naht von 10 cm, als Stabilisierung der Einhängung der Befestigungs- und Haltevorrichtung für das Einhängen der med. Sammelbeutel dient.

4. Die Sicht- Geruchs- und Temperaturschutztasche nach Anspruch 1,2 und 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass im oberen Bereich, der vorderen Filzplatte, 10 cm vom oberen Außenrand entfernt, befindet sich waagerecht eine Öffnung, von ca. 31 cm um näht mit einer Steppnaht, um den Sammelbeutel problemlos in die Schutztasche einzustecken,

Anhängende Zeichnungen

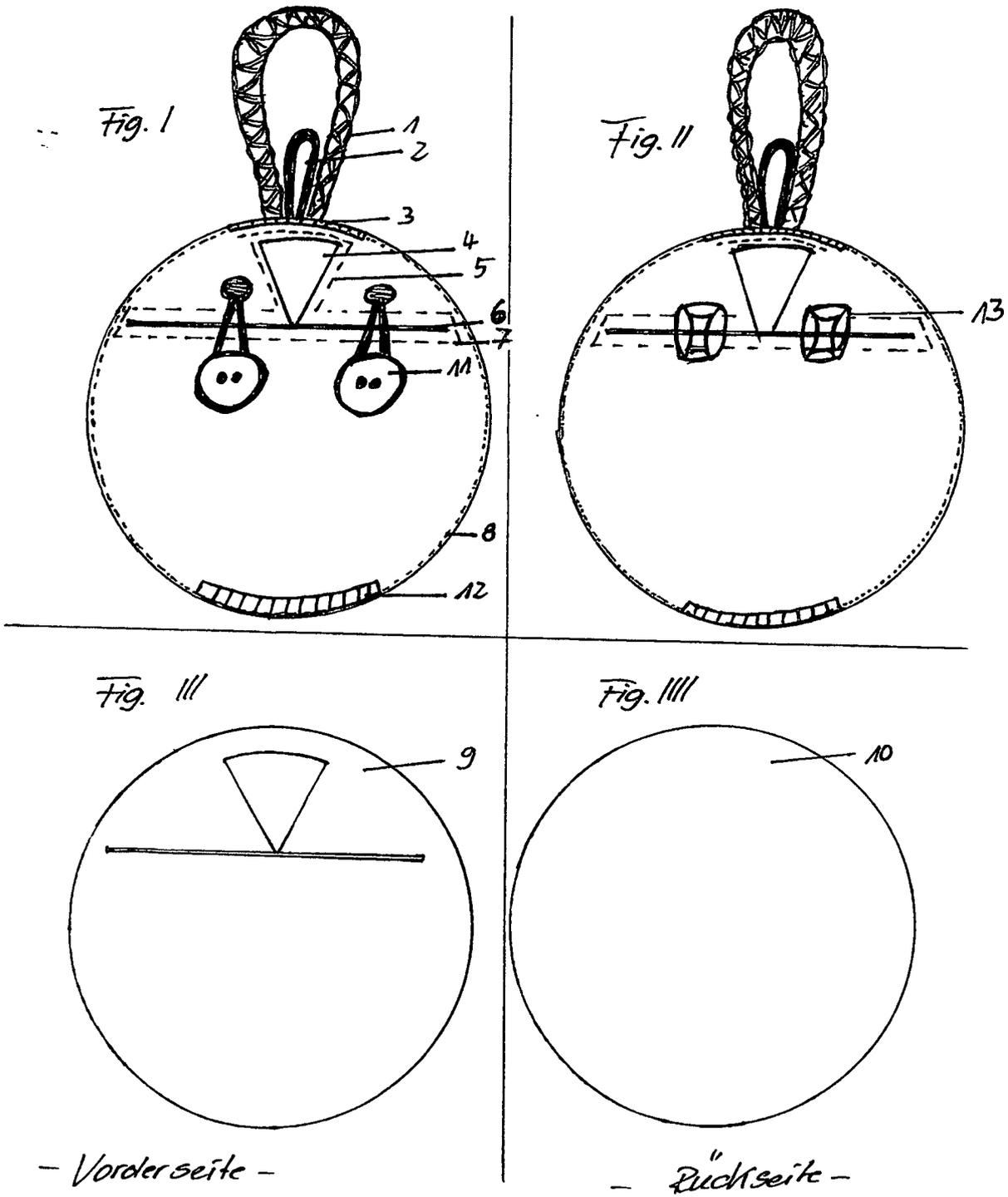

Skizzen